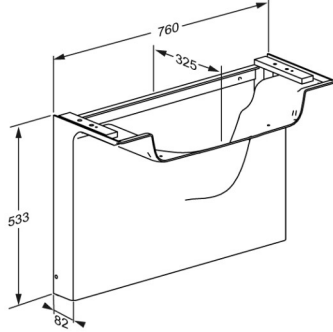




Produkt Varenummer	MATRIX vaskophæng, fastmonteret R4806000
Farve	Hvid
Produktbeskrivelse	<p>VVS:654020000 NRF:6132445 EAN:5708590367439</p>  <p>MATRIX vaskophæng er skræddersyet til MATRIX håndvaske. De fås i elektrisk og manuelt højdejusterbare versioner såvel som fastmonterede versioner, alle med en hygiejnisk installationsinddækning til at skjule VVS-installationerne.</p> <p>MATRIX vaskophæng, vægmonteret, fast højde, med hvid installationsinddækning og inkl. til- og afløbssystem. Inkl. monteringsbolte til håndvask (Kan kun anvendes med MATRIX MEDIUM håndvaske, R2120/R2121). Materialer: Pulverlakeret rustfrit stål og PMMA. Ekskl. monteringskrueskrue til væg.</p>
Justerbarhed Produktkapacitet	<p>Fastmonteret</p> <p>Maksimal belastning: 150 kg. Passer til vaske der vejer op til 25 kg. Når vasken belastes med 150 kg, belastes hver vægmonteringskrue med 60 kg. <i>Vaskophæng skal kunne bære vaskens vægt, samt vægten af en person der støtter sig til vasken, eller bruger vasken til at trække sig op ved.</i> Hverken vask eller vaskophæng er personbærende, og de testmetoder der er foreskrevet for vaskophæng afspejler dette: ISO 17966 foreskriver at vaskophæng testes statisk, på vaskens forkant, med 75% af maksimal brugervægt, dvs at når maksimalbelastningen på et vaskophæng er 150 kg og vasken vejer 25 kg, så svarer det, iflg. ISO 17966, til at en bruger der vejer 167 kg støtter sig til vasken.</p>
Materialer	Pulverlakeret rustfrit stål og PMMA.
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.

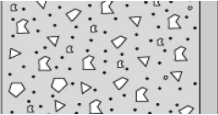
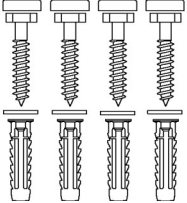

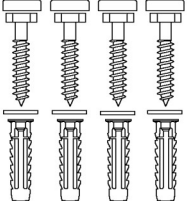
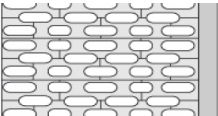
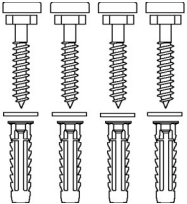
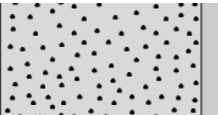
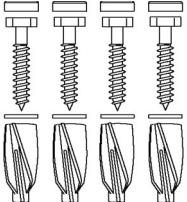
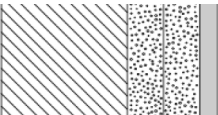
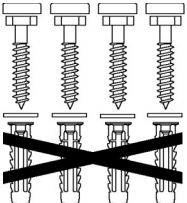


Produkt	MATRIX vaskophæng, fastmonteret
Varenummer	R4806000
Rengøring	<p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Klorbaserede desinfektionsmidler kan bruges til desinfektion af overflader i henhold til produktspecifikationen og sikkerhedsforanstaltninger for disse produkter.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon</p> <p>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p>
Overensstemmelses- erklæring	Dette produkt er fremstillet i henhold til relevante krav i rådets forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr.

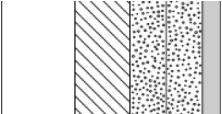
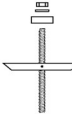

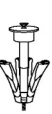
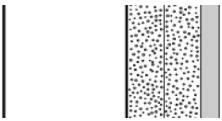
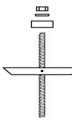


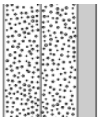
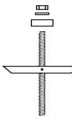




Produkt	MATRIX vaskophæng, fastmonteret
Varenummer	R4806000

Montering i forskellige vægtyper

	Beton >B25 V8605 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med grå dækknapper. Skal bestilles separat.	
	Mursten >= Mz12 V8605 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med grå dækknapper. Skal bestilles separat.	
	Kalksten >= Hz12 V8605 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med grå dækknapper. Skal bestilles separat.	
	Gasbeton P4 V8655 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel GB14, med grå dækknapper. Skal bestilles separat.	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning V8605 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med hvide dækknapper. Dübler skal ikke anvendes. Skal bestilles separat.	



Produkt Varenummer	MATRIX vaskophæng, fastmonteret R4806000	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	  
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	  
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	  

Det er installatørens ansvar at sikre, at korrekt vægbefæstigelse anvendes.